



*Research for life.™*



**Catálogo de Produtos - Gaiola Metabólica**

## Gaiola Metabólica

A Gaiola Metabólica para camundongos Alesco realiza a separação das fezes e da urina por meio de um design exclusivo que conta com um funil de separação e uma esteira de coleta confeccionados em aço inox.


Conta com comedouro e bebedouro removíveis e de fácil acesso. O sistema de coleta possui tubos coletores e partes removíveis, facilitando também o acesso e a limpeza.

### Características do Equipamento

- Construída em Acrílico de alta resistência e transparente, aço inoxidável e alumínio;
- Cúpula de contenção em acrílico transparente, que permite a visualização do comportamento do animal pelo operador;
- Bebedouro graduado, montado na vertical com coletor também graduado montado abaixo, medindo a sobra de água e a quantidade consumida;
- Comedouro com acesso restrito à cabeça do animal com coletor de resíduos montado abaixo, medindo o que o animal comeu e as sobras de ração geradas;
- Esteira exclusiva, em aço inox, para separação das fezes e da urina, com 100% de eficácia e fácil acesso para limpeza;
- Tubos coletores de fezes e urina de fácil acesso e remoção;
- Funil de alumínio de baixa aderência e ângulo agudo para evitar a deposição de fezes;
- Grade em aço inox ao nível dos animais;
- Equipamento totalmente desmontável para limpeza;
- Suporte de sustentação em aço inox incluso nas gaiolas individuais.




Conta com toda garantia Alesco e com o suporte pós-venda.

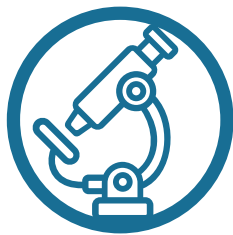

Equipamento para Análise.



Para Camundongos

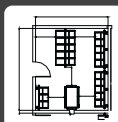

Solicite seu estudo de posicionamento

**GRÁTIS**

Clique nos ícones e veja mais sobre este Produto em ▶



Site




Youtube



**+ Bem-Estar**

### Bem-Estar Animal

Com uma área de piso superior à área recomendada pelos guias de bem-estar animal, a Gaiola Metabólica da Alesco foi confeccionada pensando também no bem-estar animal.

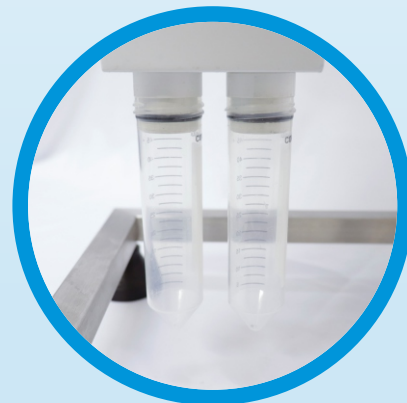

### Tubos de Coleta Individuais

O Equipamento conta com quatro tubos de coleta individuais e graduados. Dois tubos coletam os resíduos de água e ração que acabam caindo durante o consumo do animal. Outros dois tubos coletam a urina e as fezes **SEPARADAMENTE**.




### Comedouros e Bebedouros

Idealizados para facilitar o acesso do animal e para dar ao responsável total controle das quantidades oferecidas, consumidas e desperdiçadas.

O comedouro possui um acessório que permite a utilização de todos os tipos de ração disponíveis no mercado, das peletizadas às rações em pó.

### Vista Lateral

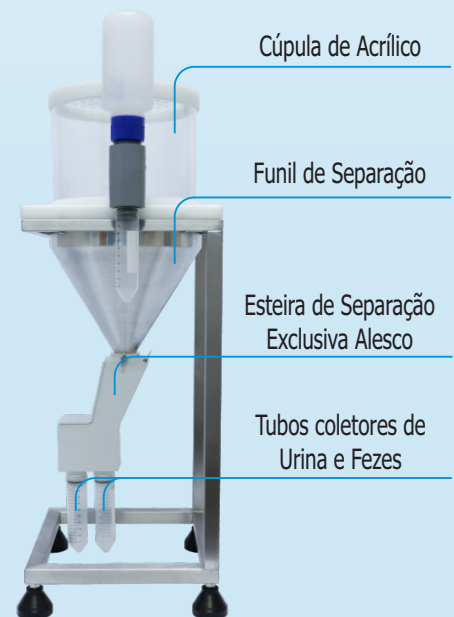


**OBS.:** As Gaiolas podem ser adquiridas separadamente ou em Racks com mais unidades. Consulte nosso setor de vendas.



# Gaiola Metabólica

A Gaiola Metabólica para camundongos Alesco separa com eficiência as fezes e a urina através de um design especial de funil e esteira de separação.

O sistema foi inteiramente projetado para se obter o máximo em bem-estar animal e eficiência na coleta de amostras.

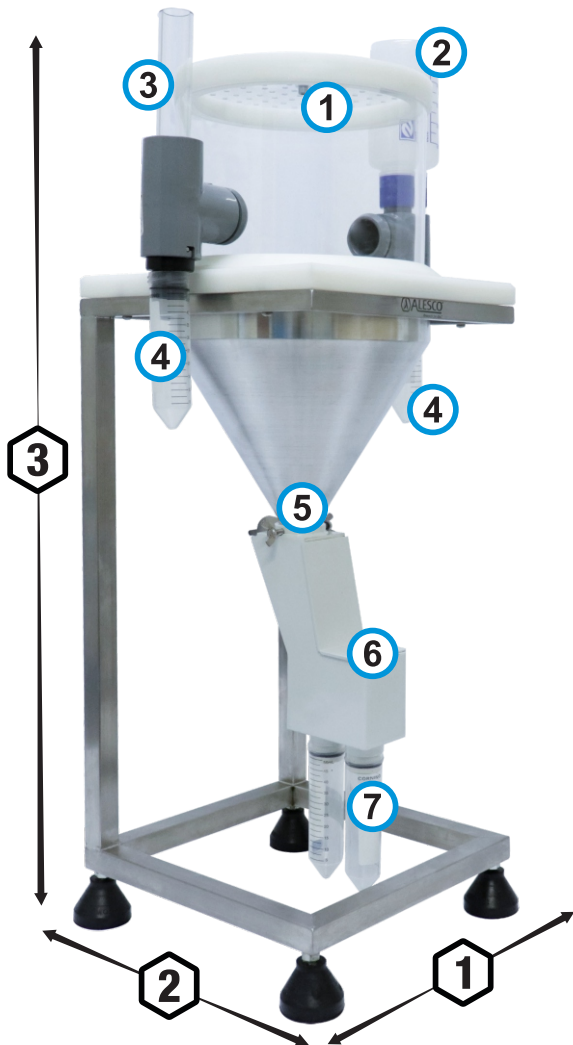

1 Cúpula em acrílico de alta resistência



2 Bebedouro graduado com coletor para sobras



3 Comedouro para rações peletizadas e/ou em pó




5 Trava de segurança de fácil liberação



6 Esteira de separação com design exclusivo Alesco



7 Coletores individuais de fezes, urina e sobras

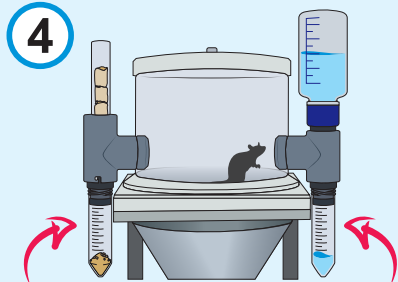


4 Coletores para mensurar sobras de água e ração

	1	2	3		
Produto	Comprimento	Largura	Altura	Peso	Área de piso
Gaiola Metabólica	320mm	280mm	700mm	4,58 Kg	432cm <sup>2</sup>



Para Camundongos

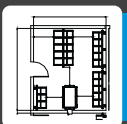

Solicite seu estudo de posicionamento **GRÁTIS**

Clique nos ícones e veja mais sobre este Produto em ▶



Site



Youtube

## IMPORTANTE

É altamente recomendado que cada instituição faça o teste dos procedimentos em condições reais de uso e manuseio, antes de iniciar o processo com o equipamento adquirido. O profissional que executar os procedimentos deve estar paramentado com todos itens de EPI. Recomenda-se o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) para realização dos procedimentos, seguindo os POPs (Procedimento Operacional Padrão) de sua instituição e as leis e/ou normas de regulamentação de seu país. Experimentos desenvolvidos no equipamento, bem como qualquer contaminação causada por negligência no uso de outras barreiras sanitárias de proteção necessárias, não serão de responsabilidade da ALESCO.





[www.alesco.com.br](http://www.alesco.com.br)



(19) 3879-2037 | 3879-2777



[contato@alesco.com.br](mailto:contato@alesco.com.br)



(19) 9 8232-5657