



*Research for life.™*



**Catálogo de Produtos - Rack para Primatas**

# RACK PARA PRIMATAS



O Rack para Primatas Alesco foi confeccionado para atender os altos níveis de segurança e bem-estar animal que os primatas exigem nos protocolos de biotérios e centros de pesquisa.

Com uma estrutura reforçada em aço inox, travas de segurança e mecanismos de mobilização, o equipamento se mostra muito eficaz no manejo diário de primatas de pequeno e médio portes.

Os Racks ainda possibilitam o intercambiamento entre os módulos, podendo abrigar animais de forma isolada ou em pequenos grupos.

## Principais Vantagens e Características

- Estrutura em aço inoxidável AISI 304;
- Equipamento de alta durabilidade, fácil limpeza e desinfecção;
- Cada Rack para Primatas Alesco possui dois Módulos Independentes;
- Painéis Laterais Móveis com possibilidade de "Finger Touch", Acesso total entre animais ou Isolamento total de animais (Toque e Visão);
- Travas de segurança em todas as partes removíveis;
- Possibilidade de uso de cadeados de segurança além das travas do equipamento;
- Porta frontal com possibilidade de personalização: Porta Estilo Guilhotina ou Anexo Frontal com enriquecimento;
- Portas frontais com abertura total, facilitando a limpeza de cada módulo;
- Bandeja de excretas removível e em Aço Inox;
- Bandeja com nivelamento que auxilia na coleta e/ou limpeza de fezes e urina;
- Poleiros com "pega" confortável em diversos níveis de altura, o que promove um aumento no Bem-estar animal;
- Facilidade e segurança no manejo e mobilização dos animais através de um sistema de grade de compressão deslizante;
- Diversas partes removíveis para facilitar a limpeza e desinfecção do equipamento;
- Comedouro resistente e com mecanismos que evitam o acesso do animal através da grade. Acesso externo para introdução de alimento, dando segurança ao procedimento de alimentação.
- Bebedouro automático em Inox na parte de trás de cada módulo. Tamanho específico para pequenos primatas;
- Rack móvel: possui 4 rodízios de alta resistência, sendo 2 com travas;
- Possibilidade de Interligação Horizontal e Vertical entre os Módulos Individuais;
- Possibilidade de trabalho com animais isolados ou em grupos, interligando os Racks Modulares;
- Atende às normas internacionais de bem-estar animal;
- Possibilidade de 2 bebedouros externos manuais com capacidade de 700ml cada e com proteção para evitar acesso dos animais.

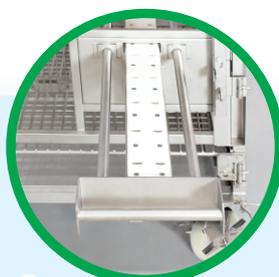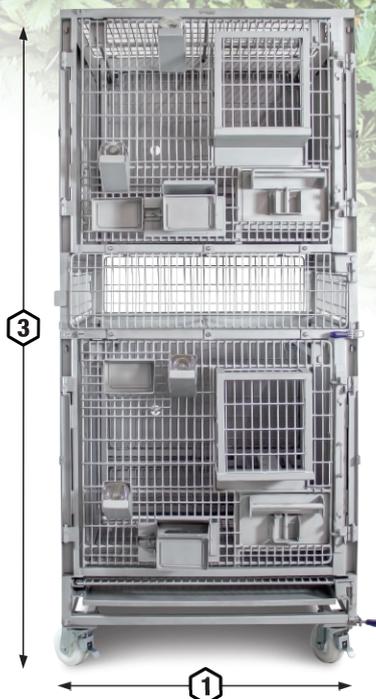


## +Bem-estar

Cada módulo possui uma série de poleiros em alturas distintas, o que permite ao animal se pendurar e descansar, aumentando assim sua movimentação e os seus níveis de bem-estar.



## Portas Laterais Móveis

As portas laterais móveis permitem o contato entre primatas de três modos: Através da grade (Finger Touch), através da abertura total da porta (acesso total entre animais) e o isolamento total dos animais. Isso permite o manejo de animais isolados ou em grupos. Os Racks para Primatas são modulares e podem ser interligados.

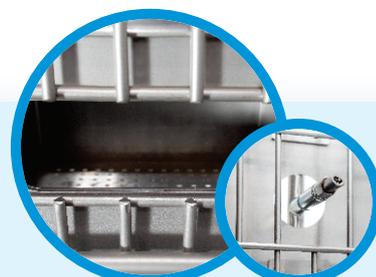

## Comedores e Bebedouros

Comedouro reforçado em aço inox com acesso externo para introdução de alimento. Conta com piso perfurado para evitar acúmulo de material e com sistema que evita acesso do animal pela grade. Bebedouro automático específico para primatas.



## Dimensões do Módulo Individual

Profundidade	Largura	Altura	Área de Piso
830mm	710mm	820mm	5893cm²


Cada Rack para Primatas Alesco possui 02 Módulos Individuais.

*Estrutura Modular*

**PARA MODELOS PERSONALIZADOS**  
Consulte nossos consultores científicos ou nossa equipe de Vendas.

1	2	3	
*Profundidade	*Largura	*Altura	*Peso
1100mm	950mm	2200mm	240Kg

\* Dimensões máximas do equipamento

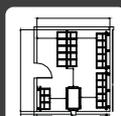

Solicite seu estudo de posicionamento **GRÁTIS**

Clique nos ícones e veja mais sobre este produto em



Comedouro com Sistema de Proteção e Acesso Externo para Introdução de Alimentos



Porta com área externa e enriquecimento ambiental para que o animal possa forragear o alimento

*+ Bem-estar*



*+ Bem-estar*  
Poleiros e Barras Horizontais em Diferentes Alturas Aumentando os Níveis de Bem-Estar



Facilidade e segurança no manejo e mobilização dos animais através de um sistema de grade de compressão deslizante



Portas Laterais Móveis Permitindo "Finger Touch", Acesso Total entre os Animais e Isolamento Total.



Bandejas em Aço Inox, Removíveis e de Fácil Limpeza e Desinfecção



Sistema de Bebedouros\*\* Automático com Tubulação em Aço Inox com Engates Rápidos.

\*\*Possibilidade de bebedouros manuais




Cada Rack para Primatas Possui 02 Módulos Individuais\*

*Interligação Vertical e Horizontal*



Racks Móveis com Rodízios e Puxadores Resistentes

\*Permite a interligação contínua de Rack para Rack, por meio das portas laterais deslizantes.

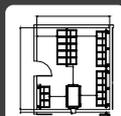

Solicite seu estudo de posicionamento **GRÁTIS**

Clique nos ícones e veja mais sobre este produto em ▶



Site



Youtube



## Porta Lateral Deslizante



Finger Touch



Contato Visual



Acesso Total



Isolado

## Sistema Modular

Os Racks para Primatas Alesco são modulares e possuem a capacidade de interligação entre eles, o que permite a expansão dos módulos para o manejo de primatas em grupos.

A interligação entre os Racks Modulares realiza-se por meio das portas deslizantes e um robusto sistema de fechos de segurança. Não há limite para as conexões entre Racks, destacando-se que elas ocorrem lateralmente e verticalmente.



Sistema Altamente Seguro de Fechos


## O pós-venda mais conhecido do mercado agora tem nome:

- Assistência técnica própria e especializada;
- 100% de peças em estoque, garantindo uma rápida reposição;
- Ao seu lado, estamos sempre prontos para atendê-lo com rapidez.



ALES CO  
**CARE**

*Conheça a nossa  
Garantia Estendida*

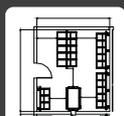

Solicite seu estudo  
de posicionamento

**GRÁTIS**

Clique nos ícones e veja mais sobre este produto em ▶



Site




Youtube



## IMPORTANTE



É altamente recomendado que cada instituição faça o teste dos procedimentos em condições reais de uso e manuseio, antes de iniciar o processo com o equipamento adquirido. O profissional que executar os procedimentos deve estar paramentado com todos itens de EPI. Recomenda-se o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) para realização dos procedimentos, seguindo os POPs (Procedimento Operacional Padrão) de sua instituição e as leis e/ou normas de regulamentação de seu país. Experimentos desenvolvidos no equipamento, bem como qualquer contaminação causada por negligência no uso de outras barreiras sanitárias de proteção necessárias, não serão de responsabilidade da ALESCO.

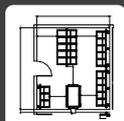

Solicite seu estudo  
de posicionamento

**GRÁTIS**

Clique nos ícones e veja mais sobre este produto em ▶



Site



Youtube



[www.alesco.com.br](http://www.alesco.com.br)



(19) 3879-2037 | 3879-2777



[contato@alesco.com.br](mailto:contato@alesco.com.br)



(19) 9 8232-5657